

Démarrer une session de test


Ouvrir Gazelle Test Management

- Utiliser le compte [interop\[sante\]@nomdesociete.com](mailto:interop[sante]@nomdesociete.com) pour accéder à la plateforme Gazelle Interop'Santé
- Sélectionner Gazelle Test Management



Se connecter

- Utiliser un compte de l'organisation déclaré sur Gazelle Test Management
- Choisir la session de test

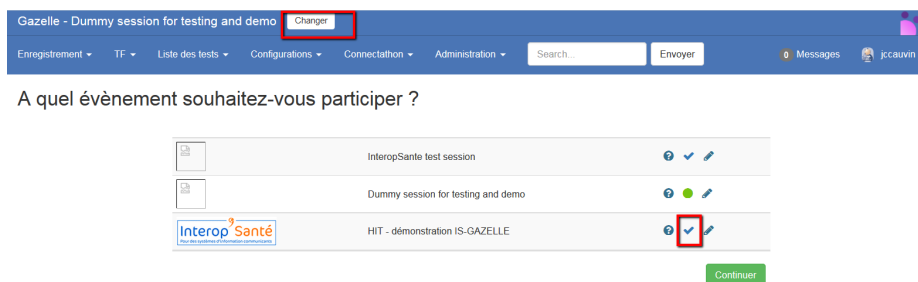

Afficher les tests

- Sélectionner Connectathon->Connectathon->Connectathon
- Il est possible de filtrer les tests par rapport au produit que l'on veut tester et l'acteur que l'on veut simuler.

Page Principale du Connectathon

Search criteria

Session de test	HIT - démonstration IS-GAZELLE	Dernière mise à jour :	
Organisation	(2) PME - Madasys	Système	Afficher tout
Domaine	(2) IHE-FR - IHE France	Option Prof. d'intég.	Afficher tout
Profil d'intégration	(2) PAM_FR - Patient Administration Management ...	Transaction	Afficher tout
Acteur	(2) PDS - Patient Demographics Supplier	Type de Test	Afficher tout
Resultats	Afficher tout		

Toutes Les Options
 Test sans partenaire
 Test point à point
 Non attribué
 Test de groupe

Enregistrer les critères de recherche

Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 présélections de filtres pour cette page :

Nom de la présélection :

None

Cochez la case si vous souhaitez en faire votre page par défaut

Sys	Profil	Acteur	Option de profil	Type	R/O	Partenaires	V	W	P	F	Commentaires du vendeur
ADT_PME_DxCare	PAM_FR	PDS	MERGE	T	1/0	0%	0%	0%	0%		Veillez sélectionner une valeur...
			Meta Test								
			PAMFR_ID_Mgmt_Europe	+	R / 3	0/3					Click to write a comment
			Un test								
ADT_PME_DxCare	PAM_FR	PDS	NONE	T	0/0	?	?	?	?		Veillez sélectionner une valeur...
			Meta Test								
			Aucun test								

- Le détail du test est accessible en cliquant sur le lien du test (PAMFR_ID_Mgmt_Europe).
- Le nombre de partenaire est accessible en cliquant sur le lien de la colonne Partenaires (0/3).

Démarrer un test

- Cliquer sur le signe + de la colonne Type.
- Sélectionner un participant PAM PDC.

Démarrez l'instance de test

PAMFR_ID_Mgmt_Europe Configuration

Rôle	Systèmes	Mot clé du système	Profil d'intégration	Acteur	Table	Action
	Nom de l'organisation					
	PDC-PAM-FRANCE [1,1]					<input type="button" value="+"/>
0 Participants						
	PDS-PAM-FRANCE [1,1]					<input type="button" value="✓"/>
1 Participant	PME	ADT_PME_DxCare	PAM_FR	PDS		

- Appuyer sur la flèche verte pour démarrer le test.

Démarrez l'instance de test

PAMFR_ID_Mgmt_Europe Configuration

Rôle	Systèmes	Mot clé du système	Profil d'intégration	Acteur	Table	Action
	Nom de l'organisation					
	PDC-PAM-FRANCE [1,1]					<input type="button" value="✓"/>
1 Participant	OX	ADT_OX_1	PAM_FR	PDC		<input type="button" value="⊘"/>
1 Participant	PDS-PAM-FRANCE [1,1]					<input type="button" value="✓"/>
1 Participant	PME	ADT_PME_DxCare	PAM_FR	PDS		

Déroulement du test

- Réaliser la première étape.

Étapes d'instance de test

Étape	Trans.	Trans. - Type de Message	Opt.	Sending Actor	Receiving Actor	Statut	Statut de Validation	
	ITI-30	ADT*A28*ADT_A05	R	ADT_PME_DxCare - PDS	ADT_OX_1 - PDC			
		Desc: Creation d'un patient masculin divorcé (PAT1), avec l'ensemble des données démographiques: identifiant local, identité (nom de naissance) adresse (adresse personnelle et adresse de vacances), une date de naissance, un n° de tel (domicile), identité provisoire						
20		Logs: Aucun commentaire, fichier ou URL					<input type="button" value="✕"/>	<input type="button" value="✓"/>
		<input type="button" value="+"/> Télécharger un fichier (clic ou dépose)						
		Messages de proxy						

- Vérifier avec le partenaire que le Patient est bien arrivé. Il est possible de faire une capture d'écran de l'application du partenaire pour afficher le patient.
- Les messages échangés (ADT^A28 et accusé de réception) sont disponibles en cliquant sur Messages du proxy.

Messages

Filtrer les messages par origine
 Filtrer les messages par destination de port du proxy
 Filtrer de message par dates

```

(
  (
    from 89.83.122.45
    AND
    proxy port 20006
  )
)
AND
date > 2016-04-29 11:55:22.339
AND
date < Sat Apr 29 11:55:22 CEST 2017
  
```

Filtrer les messages avec des dates précises

Id connexion :	Index	Type	Détails	Date :	Temps (µs)	De :	À :	Proxy :	Infos
175	1		Détails	29/04/16 12:06:17 (CEST GMT+0200)	638501	89.83.122.45:27643	5.104.196.150:7001	20006	ADT^A28^ADT_A05
175	2		Détails	29/04/16 12:06:48 (CEST GMT+0200)	942056	89.83.122.45:27643	5.104.196.150:7001	20006	ACK^A28^ACK

- Chaque message peut être visualisé en cliquant sur Détail.

Message HL7

Détails du message

Lien permanent : [Lien permanent](#)

ID : 268

ID de connexion : 175

Index : 1 / 2

Date de réception : 29/04/16 12:06:17 (CEST GMT+0200)

Initiateur		Côté Répondeur	
IP initiateur	89.83.122.45	IP répondeur	5.104.196.150
Port de l'initiateur	27643	Port du répondeur	7001
Port proxy	20006	Longueur du message	345

Contenu du message

```

MSH|^~\&|Dx_Care^1.2.250.1.38.3.1.101^ISO|PAM_FR|MediBoard|PAM_FR|20160429120617||ADT^A28^ADT_A05|16772|P|2.5^FRA^2.6|||||FRA|8859/15|FRA
EVN||20160429120617||||20160429120617
PID||7616001946^^PAM_FR&PAM_FR&EI^PI||TEST DEUX^MEDASYS^^^^L||199004291157|M||||^DOURDAN^^91410^FRA^H^*****FRA^BDL|||||||||1|||||IN||PROV
FD1|||||||||IN
PV1|IN
  
```

- Le message peut être validé avec EVS Client en cliquant sur la coche verte.
- Choisir le type de validateur (HL7v2), l'extension (IHE France) et Go.

External Validation Service Front-end (InteropSanté)

[Home](#)
[Message Content Analyzer](#)
[Statistiques](#)

Validation de messages depuis un service distant



Merci de sélectionner le type de validation à réaliser de manière à être redirigé vers le bon validateur.

Type de validateur : Extension :

```

MSH|^~\&|Dx
Case^1.2.250.1.38.3.1.101^ISO|PAM_FR|MediBoard|PAM_FR|20160429120617||ADT^A28^ADT_A05|16772|P|2.5^FRA^2.6|||||FRA|8859/15|FRA
EVN||20160429120617||||20160429120617
PID||7616001946^^PAM_FR&PAM_FR&EI^PI||TEST
DEUX^MEDASYS^^^^L||199004291157|M||||^DOURDAN^^91410^FRA^H^*****FRA^BDL|||||||||1|||||IN||PROV
FD1|||||||||IN
PV1|IN
  
```


- Choisir l'acteur (Patient Demographics Supplier) et le Type de message (ADT^A28^ADT_A05) et cliquer sur la flèche bleue à droite de la ligne sélectionnée.

Domaine d'affinité	Domaine	Acteur	Transaction	Type de message	version HL7	OID du profil	Action
IHE France	ITI - IT-Infrastructure	PDS - Patient Demographics Supplier	ITI-30 - Patient Identity Management	ADT^A28^ADT_A05 (1)	2.5	2.16.840.1.113883.2.8.3.1.23	
IHE France	IT-Infrastructure	Patient Demographics Supplier	ITI-30	ADT^A28^ADT_A05	2.5	2.16.840.1.113883.2.8.3.1.23	

- Le message est validé. Ajouter le lien permanent du proxy dans la zone de l'étape.

Message HL7

Détails du message

Lien permanent : [Lien permanent](#) 

ID :	268	Initiateur		Côté	Répondeur
ID de connexion :	175	IP initiateur	89.83.122.45	IP répondeur	5.104.196.150
Index :	1/2	Port de l'initiateur	27643	Port du répondeur	7001
Date de réception :	29/04/16 12:06:17 (CEST GMT+0200)	Port proxy	20006	Longueur du message	345

Résultat de la validation			
OID du résultat de validation	Date du résultat de validation	État du résultat de la validation	Action
2.16.840.1.113883.2.8.3.9.95	29/04/16 12:22:35 (CEST GMT+0200)	PASSED	Supprimer ce résultat de validation

Contenu du message


```


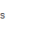










MSH|^~\&|Dx Care^1.2.250.1.38.3.1.101^ISO|PAM_FR|MediBoard|PAM_FR|20160429120617||ADT^A28^ADT_A05|16772|P|2.5^FRA^2.6||||FRA|8859/15|FRA
EVN||20160429120617|||20160429120617
PID||17616001946^^^PAM_FR&PAM_FR&EI^PI||TEST DEUX-MEDASYS^^^^^L||199004291157|M||^DOURDAN^^91410^FRA^H^^^^^FRA^BDL|||||||||1|||||IN|PROV
FD1|||||||||IN
PV1|IN
  
```

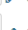


- Valider l'étape et passer à l'étape suivante.

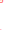ITI-30 - ADT^A28^ADT_A05 R ADT_MEDASYS_DxCare - PDS ADT_OX_1 - PDC

Desc: Creation d'un patient masculin divorcé (PAT1), avec l'ensemble des données démographiques: identifiant local, identité (nom de naissance) adresse (adresse personnelle et adresse de vacances), une date de naissance, un n° de tel (domicile), identité provisoire

Logs:  [Télécharger un fichier \(clic ou dépose\)](#)

Date	Utilisateur	Type	Données	Actions
29/04/16 13:33:28	jccauvin	Fichier	2016-04-29_1332.png	   
29/04/16 13:51:58	jccauvin	Proxy	/messages/h17.seam?id=268	   
29/04/16 13:52:30	jccauvin	Proxy	/messages/h17.seam?id=273	   

Fin du test

- Lorsque toutes les étapes ont été faites test est fini lorsque toutes les étapes sont réalisées.
- Il faut passer le test au statut « A vérifier » (en bas de page).

Liste des tests

- La liste des tests est disponible via Connectathon->Connectathon->Instances de test.

Résumé des tests intances

Search criteria 🔄 🔍

Session de test	HIT - démonstration IS-GAZELLE	✖	Système	Afficher tout	✖
Mot clé de l'organisation	Afficher tout	✖	Option Prof. d'intég.	Afficher tout	✖
Domaine	Afficher tout	✖	Transaction	Afficher tout	✖
Profil d'intégration	Afficher tout	✖	Type de Test	Afficher tout	✖
Acteur	Afficher tout	✖			
Test	Afficher tout	✖			
Moniteur	Afficher tout	✖			

0 tests critiques 1 tests à vérifier 0 tests partiellement vérifiés 0 tests vérifiés 0 tests annulés 0 tests en pause 2 tests commencés 0 tests échoués

Tests

1 cas de test

Id	Nom du Test	Type de Test	Dernière activité	Participants au test	Moniteur
41376	PAMFR_ID_Mgmt_Europe	Test point à point	29/04/16 13:58:49	ADT_MEDASYS_DaCare () ADT_OX_1 ()	PAM_FR PAM_FR PDS PDC MERGE MERGE

Résultats par page: 100

- Il est possible d'interrompre un test et de le reprendre.

Validation des tests

- La validation des tests est réalisée par un moniteur. Pour le moment, il n'y a pas de moniteur Interop'Santé dédié à la plateforme.